



## Totalskydd för den oskoddade hoven.

Sole-Guard är den första produkten i sitt slag som ger effektivt skydd för den oskoddade hoven. Sole-Guard är stadig efter härdning och ger sulan ett skyddande och stödjande skikt som inte bara fäster bra utan även varar i 3 veckor. Flexibiliteten hos Sole-Guard ger bekvämlighet eftersom den rör sig tillsammans med den naturliga hovmekanismen. Sole-Guard ger ett fullständigt skydd och stöd i en enda enkel applikation.

Sole-Guard är mycket lämplig för hästar som övergår från hästskor till "barfot", avslamrår som kan behöva extra stöd under sista delen av dräktigheten och hästar som kan behöva extra skydd eftersom de rids i tuff terräng.

## Sole Protection & Support Material

Sole-Guard is the first product of its kind to offer fast effective protection and support for the unshod foot. Simply fill the bottom of the foot with Sole-Guard creating a protective coating that bonds to the foot up to three weeks. Sole-Guard sets firm to protect the unshod foot, yet retains flexibility to move naturally, providing comfort and support, in one easy application.

Sole-Guard is excellent for horses that are transitioning away from shoes, brood mares that need extra support late term and horses that just need extra protection while riding in rough terrain.

## Standardtillämpning Standard Application



1 Verka, raspa och jämna ut hoven som vanligt. Se till att strålen är ordentligt ren och alla avfägrande delar av sulan borttagna.

TORKA noga med hjälp av en hårföhn eller värmepistol, även om du inte tror att det behövs. Överhettas inte.

Prepare foot as normal with proper trim and balance. Be sure to have the commissures of the frog clean and remove any sole that is ready to exfoliate.

Then DRY thoroughly. Use heat gun or hair dryer, even if you think that it's not necessary. Don't overheat.



2 Var beredd med konturförmen infyllt tån och håll upp hoven med strålen uppåtvänd. Lägg på Sole-Guard på sulan så att du har tillräckligt med material för att fylla upp till den vita randen. Lägg INTE på över hovkanten.

With contouring plastic held at the toe, hold the hoof up and dispense Sole-Guard onto the sole using enough material to cover the entire sole to the white line.

## Standardtillämpning Standard Application



3

Placera konturfilm över sulan och jämna till Sole-Guard. Håll upp hoven cirka 30 sekunder och sätt sedan försiktigt ner den igen.

After application, bring the plastic back from the toe to the heel smoothing and pushing material for even fill of sole and frog. Hold hoof for about 30 seconds.




4

1 minut efter appliceringen av Sole-Guard placerar du hoven försiktigt på marken. Det är såhär hoven ser ut efter fullständig belastning. Lägga även märke till hur Sole-Guard fördelar sig över sulan.”

One minute after applying Sole-Guard, place foot down on smooth, hard surface. The hoof looks like this after weight bearing. Note even distribution of material.

## Standardtillämpning Standard Application

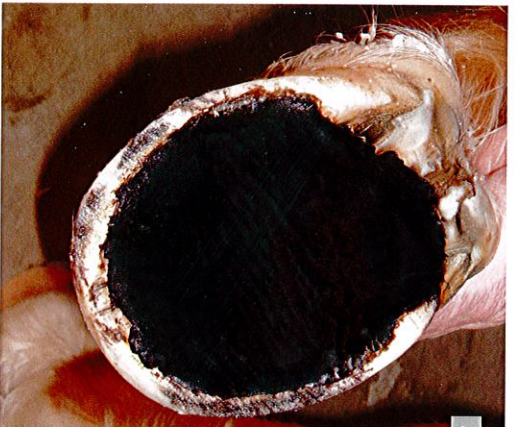

4

Ta bort konturfilm efter 5-6 minuter. Det här är slutresultatet: stöd och skydd!

Hoof after final set, remove the plastic after 5 to 6 minutes, and this will be your result; support & protection!



Ref.	Beskrivning
46904	Konturfilm, rullar om 3 m.
Ref.	Description
46904	Contouring Plastic. Roll of 3 meters